



## Příslušenství pro ALSIDENT® SYSTEM 63 ... široká nabídka hubic a konzol

Příslušenství pro ALSIDENT® SYSTÉM 63 zahrnuje montážní konzoly, hubice a redukce.

Montážní konzoly jsou vyrobeny z oceli povrchově upravené práškovým lakem. Konzoly jsou k dostání ve variantách pro uchycení na stůl, na zeď nebo existují tzv. závěsné konzoly (nástropní sloupky) pro uchycení ze stropu. Nástropní sloupky se dodávají ve standardních délkách v rozmezí 250 mm až 2000 mm.


Redukce je vyrobena z polypropylenu (PP) a používá se pro napojení sacího ramene na ventilační systém.

Výběr hubic pro ALSIDENT® SYSTEM 63 je velmi široký. Nabízí nejvhodnější řešení pro každé pracoviště a typ škodlivin.

Volba materiálu hubice závisí na modelu a na materiálové verzi. Hubice pro ALSIDENT® SYSTEM 63 se dodávají v provedení z průhledného PETG (polyethylentereftalát) nebo PP (polypropylen) nebo z bílého PP (polypropylenu). Podrobnější informace naleznete na vložené příloze.

Můžete také navštívit naše internetové stránky [www.alsident.com](http://www.alsident.com) nebo kontaktovat prodejce.

prodejce

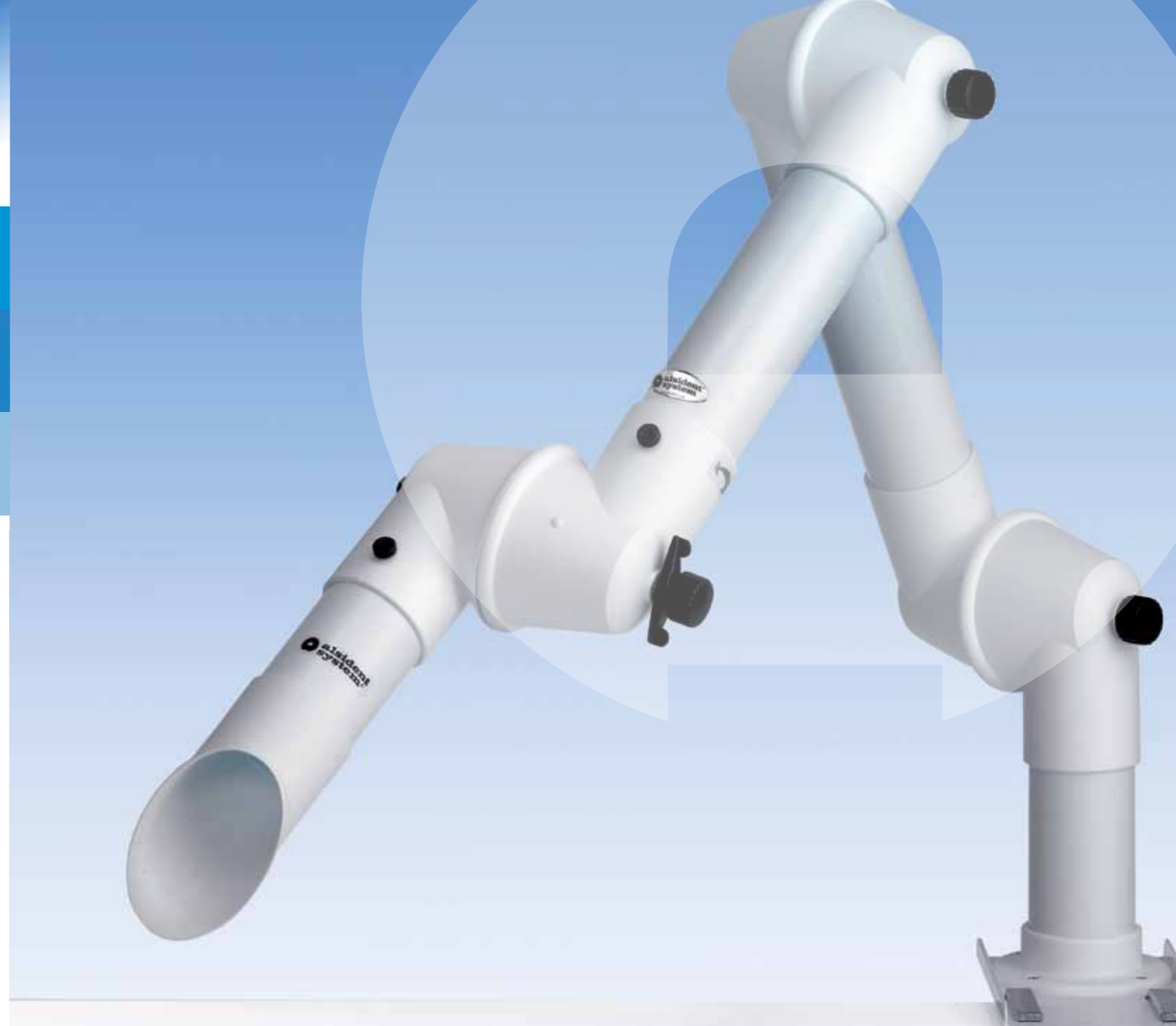

# ALSIDENT® SYSTEM 63

## Chemicky odolná sací ramena



## Lokální odsávání – pro čistší pracovní prostředí

Instalace individuálních systémů pro odsávání výparů při pracovním procesu přímo u zdroje škodlivin zabraňuje šíření znečištěného vzduchu do okolí. Systémy lokálního odsávání jsou proto nejlepším řešením pro čisté pracovní prostředí.

### Snadno ovladatelná sací ramena

Ramena pro odsávání výparů ALSIDENT® SYSTEM mají samonosné provedení s vnitřními závitovými podložkami a nosnými pružinami. Tato konstrukce zajišťuje velmi snadnou ovladatelnost a polohovatelnost ramene podle zdroje škodlivin při pracovním procesu.

### Snadná údržba a dlouhá životnost

Sací ramena ALSIDENT® SYSTEM nevyžadují jinou údržbu než čištění podle specifikovaných požadavků. Ramena se před čištěním a po čištění snadno rozebírají a skládají bez nutnosti dalších nástrojů. Sací ramena ALSIDENT® SYSTEM se vyrábějí z kvalitních materiálů, které zaručují snadnou údržbu a dlouhou životnost. Všechny plastové části jsou vyrobeny z polypropylenu (PP) a jsou odolné proti nárazu. Hliníkové části jsou eloxované a vnitřní i vnější povrchy všech konzol jsou pokryté práškovou barvou. Závitové podložky, pružiny a nastavovací šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli odolné proti kyselinám a mají dlouhou životnost i v agresivním prostředí. Všechny O-kroužky jsou bezúdržbové.

### Měření poklesu tlaku a účinnosti

Úroveň hluku, pokles tlaku a účinnosti sacích ramen ALSIDENT® SYSTEM měřil Dánský technologický institut. Výsledky testů, rozměrová schémata a instalační výšky získáte od společnosti ALSIDENT SYSTEM A/S, od svého prodejce nebo je naleznete na internetové stránce [www.alsident.com](http://www.alsident.com).

# ALSIDENT® SYSTEM 63 ... pro agresivní pracovní prostředí

## Použití

**ALSIDENT® SYSTEM 63 je vhodný pro objemy vzduchu od 60 do 120 m<sup>3</sup>/h**

ALSIDENT® SYSTEM 63 se používá v různých oborech, kde je třeba chemicky odolného sacího ramene: laboratoře, chemický průmysl, školy, univerzity a podobně.

## Přizpůsobení pracovním podmínkám

Sací ramena ALSIDENT® SYSTEM 63 lze pomocí standardních konzol rychle připevnit ke stolu, na zeď nebo na strop.

Standardní ALSIDENT® SYSTEM 63 je dostupný v různých vzájemně kompatibilních typech až do velikosti 1500 mm. Lze proto zvolit pro každou pracovní situaci nejvhodnější rameno. Viz vložený technický list s podrobnější informací.

## Materiál

Chemicky odolná sací ramena ALSIDENT® SYSTEM 63 (CR) se používají v prostředí se zvláštními požadavky na chemickou odolnost, například v prostředí s chemickými výparů. Trubice a klouby jsou v této verzi vyrobené z bílého polypropylenu (PP). Podrobné informace o odolnosti vůči specifickým chemikáliím získáte od svého prodejce ALSIDENT®.

## Snadné používání

ALSIDENT® SYSTEM 63 doplňuje standardní produktovou řadu takovými vlastnostmi, jako je mobilita a snadné polohování v průběhu pracovního procesu. Systém je vhodný pro aplikace, vyžadující časté změny nastavení během procesů. ALSIDENT® SYSTEM 63 umožňuje nastavení ramene do různých poloh jednou rukou.

## Individuální řešení – krátké dodací lhůty

Kromě standardní produktové řady nabízí ALSIDENT® SYSTEM 63 také speciální řešení. O nejvhodnějším řešení se můžete kdykoli poradit s technickým oddělením společnosti ALSIDENT®.

ALSIDENT® nabízí krátké dodací lhůty jak u standardních produktů, tak u speciálních řešení.




## Materiály

	System 63 CR
Trubice – ø 63 mm	polypropylen (PP)
Klouby a příruby	polypropylen (PP)
Závitová podložka a pružiny	nerezová ocel odolná proti kyselinám <sup>1)</sup>
O-kroužky	polyetylen (PE)

<sup>1)</sup> AISI 316L



### Sací ramena System 63 – Ø 63 mm



	dosah [mm]	základní číslo produktu	PP (bílá)
			○
<b>MONTÁŽ NA STŮL – 2 KLOUBY</b>			
	530	63-35-1-	7-5
	630	63-45-1-	7-5
	730	63-55-1-	7-5
<b>MONTÁŽ NA STŮL – 3 KLOUBY</b>			
	800	63-3535-1-	7-5
	1080	63-5545-1-	7-5
<b>MONTÁŽ NA STŮL A NA STROP – 3 KLOUBY</b>			
	760	63-3535-3-	7-5
	1120	63-3590-3-	7-5
	1025	63-5545-3-	7-5
	1190	63-6555-3-	7-5
	1500	63-9065-3-	7-5

ALSIDENT® SYSTEM 63 se skládá ze tří částí, které se objednávají zvlášť: sací rameno, hubice a konzola.  
 Produktová čísla hubic a konzolí – viz protější strana.  
 Další informace o příslušenství získáte na naší internetové stránce [www.alsident.com](http://www.alsident.com).

prodejce





### Hubice






SACÍ TRUBICE	délka [mm]	základní číslo produktu	PP (bílá) barva plastové části: ○
	250	1-6325-7-	-5
HUBICE	rozměr [mm]	základní číslo produktu	PP (bílá) barva plastové části: ○
	300 x 250*	1-632422-	5
	ø 280*	1-6328-	5
	ø 385*	1-6335-	5
	ø 385	1-6335-7-	5
	330 x 240*	1-633324-	5
	330 x 240	1-633324-7-	5

\*) PETG: Polyethylentereftalát, modifikovaný glykol

### Konzola

KONZOLA	popis	produkt č.	barva
	stolní konzola	2-6310	bílá ○
	nástěnná konzola	2-195	bílá ○
NÁSTROPNÍ KONZOLA	délka [mm] (bílá)	základní číslo produktu	napojení
	250	2-250-	<del>boční</del> 20
	500	2-500-	80 20
	750	2-750-	80 20
	1000	2-1000-	80 20
	1250	2-1250-	80 20
	1500	2-1500-	80 20
	1750	2-1750-	80 20
	2000	2-2000-	80 20

### Další příslušenství

REDUKCE	průměr trubice [mm]	produkt č.	barva
	80-63	4-8063-5	bílá ○
	100-63	4-10063-5	bílá ○
OPĚRNÁ KONZOLA	rozměr [mm]	produkt č.	barva
	200 x 200	2-75-5	white ○
KRYCÍ PŘÍRUBA	rozměr [mm]	produkt č.	barva
	200 x 200	4-200-200	white ○
ČIDLO PRŮTOKU	popis	produkt č.	barva
	zvukový a optický alarm při poklesu rychlosti proudění pod 4m/s	10-01	viz. foto

ALSIDENT® SYSTEM 63 se skládá ze tří částí, které se objednávají zvlášť: sací rameno, hubice a konzola.

Produktová čísla hubic a konzol – viz protější strana.

Další informace o příslušenství získáte na naší internetové stránce [www.alsident.com](http://www.alsident.com).