

# ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleszkópos kar

Helytakarékos megoldás – nagy hatótávolsággal





## Helyi elszívás egy tisztább munkahelyi környezetért

A szennyező anyag keletkezésénél telepített egyéni elszívó rendszer megakadályozza, hogy a szennyezett levegő a környezetbe átkerüljön. A helyi elszívó rendszer ezért a legjobb megoldás egy tiszta munkakörnyezethez.

### Felhasználóbarát elszívó kar

ALSIDENT® SYSTEM elszívó karok önhordók és belső, menetes tartóval és támasztó rugóval rendelkeznek. Ez a konstrukció egy nagyon felhasználóbarát elszívó kart garantál, amit könnyű a munkafolyamat alatt keletkező szennyezőanyag forrásához állítani.

### Könnyen karbantartható és hosszú élettartamú

Az ALSIDENT® SYSTEM elszívó karon elvégzendő egyetlen karbantartás a megfelelő tisztítás. Könnyű szétszedni, majd tisztítás után összeszerelni a kart mindenféle szerszám nélkül.

Az összes ALSIDENT® SYSTEM elszívó kar kiváló minőségű anyagból készül, biztosítva a könnyű karbantartást és hosszú élettartamot. Minden műanyag rész ütésálló polipropilénből (PP) készül. Az alumínium részek eloxáltak, a tartó konzolok belső és külső felületei porszórtak. A menetes tartók, rugók és szárnyas csavarok saválló rozsdamentes acélból készülnek, hosszú élettartamot biztosítva agresszív környezetekben. A tömítések nem igényelnek karbantartást.

### A nyomásesés és hatékonyság mérése

A Dán Technológiai Intézet bemérte az ALSIDENT® SYSTEM elszívó karok hangszintjét, nyomásesését és hatékonyságát. A teszt eredményeivel, méretekkel és telepítési magasságokkal kapcsolatos információkért, kérem, forduljon a forgalmazóhoz vagy látogasson el a [www.alsident.com](http://www.alsident.com) honlapra.

# ALSIDENT® SYSTEM – elegáns és p

### Alkalmazás

**Az ALSIDENT® SYSTEM5 rendszer 80-180m<sup>3</sup>/óra (45-110 CFM) levegő elszívásához alkalmas.**

Az ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleszkópos kar úgy épül fel, mint egy 2 csuklós kar teleszkópos csővel. A teleszkópos cső helytakarékos, és nagyon jól használható rögzített munkavégzéshez pl. a laboratóriumokban, műhelyekben, készülékek mérésénél és folyadékok öntésénél.

### A munkakörülményekhez alakítva

Az ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleszkópos elszívó karok gyorsan felszerelhetők standard tartó konzollal falra vagy mennyezetre.

A standard ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleszkópos kar 2 típusa kapható, 1 300 mm és 1 900 mm maximum hatótávolsággal. A típus és a hatótávolság megfelelő kombinációjával elérhetjük, hogy minden munkához megtaláljuk a megfelelő elszívó kart. További információkat a belső szórólapon talál.





# M 75 Teleszkóp

## Praktikus elszívó kar

### Aluminium (AL) – a legtöbb alkalmazáshoz

Az ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleszkópos kar alumíniumból (AL) készül és olyan környezetben használják, ahol nem szükséges a kémiai ellenállóság és vezetőképesség.

Az ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleszkópos karok alumínium csövekből és mozgatható fehér polipropilén (PP) csuklóból állnak. A teleszkópos cső átmérője 100 mm-ről 75 mm-re van szűkítve. A csúszó cső rendkívül variábilis és önhordó rendszerű.

### Egyedi megoldások – rövid szállítási határidő

A standard típusok mellett az ALSIDENT® SYSTEM 75 különleges megoldásokat is kínál. Kérem, forduljon a forgalmazóhoz, hogy az Ön számára legjobb megoldást megtalálja.

Az ALSIDENT® rövid szállítási határidőt biztosít mind a standard, mind a speciális termékek esetében.

### Anyagok

	System 75AL Teleszkópos kivitel
Csövek 75 és 100 mm átmérő	Eloxált alumínium
Csuklók és peremes csonkok	Polipropilén (PP)
Menetes tartók és rugók	Saválló rozsdamentes acél <sup>1)</sup>
Tömítések	Polietilén (PE)/ polipropilén (PP)
Cső szűkítő	Polietilén HD (PEHD)

<sup>1)</sup> AISI 316L



## Kiegészítők ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleszkópos karhoz ... elszívó burák széles választéka

Az ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleszkópos kar kiegészítői a következőket tartalmazzák: tartó konzolok, burák és szűkítők.

A tartó konzolok (fali konzol vagy mennyezeti oszlop) a SYSTEM 100 rendszer konzoljai és fehér porszórt acélból készülnek. A mennyezeti tartó oszlopok 3 standard hosszban kaphatók: 500 mm, 750 mm és 1000 mm között (20, 30 és 40 hüvelyk).

A szűkítők polipropilénből (PP) készülnek és az elszívó kar valamint a légtechnikai rendszer összekötésére használják.

Az ALSIDENT® SYSTEM 75 Teleszkópos kar elszívó burái a SYSTEM 75 burái. A nagy választék lehetővé teszi, hogy munkakörnyezetünknek és a szennyeződésnek legmegfelelőbb típust válasszuk ki.


A bura anyagának megválasztása modelltől függ. A burák átlátszó PETG-ből (polietiléntereftál), eloxált vagy porszórt alumíniumból rendelhetők.

Bővebb információk a belső szórólapon találhatóak, illetve, kérem, forduljon a forgalmazóhoz vagy látogasson el a [www.alsident.com](http://www.alsident.com) oldalra.

Kereskedő



### System 75 Teleszkópos

	Hatótávolság [mm/"]	Cikkszám
	<b>Falra szerelt</b>	
	950-1300 / 37.40-51.20	900-1300-2
	1300-1900 / 51.20-74.80	900-1900-2
	<b>Mennyezetre szerelt</b>	
	950-1300 / 37.40-51.20	900-1300-3
	1300-1900 / 51.20-74.80	900-1900-3












ALSIDENT<sup>®</sup> SYSTEM 75 TELESZKÓPOS rendszer 3 részből áll, amelyeket külön kell megrendelni: elszívó kar, bura és tartó konzol.

A burák és tartó konzolok cikkszámai a másik oldalon találhatóak.

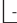

A kiegészítővel kapcsolatos további információkat talál a [www.alsident.com](http://www.alsident.com) oldalon.




### Burák

Elszívó cső	Méret [mm/"]	Alap cikkszám	ALU (kép szerint) A műanyag részek színe	
				
	250 / 9.84	1-7525-	-	-
	250 / 9.84	1-7526-	4	5
Szívófej	Méret [mm/"]	Alap cikkszám	ALU (kép szerint) A műanyag részek színe	
				
	250 / 9.84	1-7525-	4	5
Bura	Méret [mm/"]	Alap cikkszám	ALU (kép szerint) A műanyag részek színe	
				
	Átm.: 200 / 8	1-7524-	4	5
	Átm.: 200 / 8	1-7524*	-	-
	420x320 / 16,54x12,60	1-754232-	4	5
	Átm.: 280 / 11	1-7528-	4	5
	Átm.: 385 / 15	1-7535-	4	5
	330x240 / 13x9,45	1-753324-	4	5


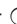


\*) alkalmas autoklávózásra

 csak egy színben  
 nem elérhető

### Tartó konzolok

Tartó konzol	Leírás	Cikkszám	Szín
	Asztali tartó	2-10035	fehér 
		2-10035-22	rozsdamentes acél 
Mennyezeti tartó oszlopok	Hossz [mm/"]	Cikkszám	Szín
	500 / 20	2-100-500	fehér 
	750 / 30	2-100-750	fehér 
	1000 / 40	2-100-1000	fehér 

### Egyéb kiegészítők

Szűkítő	Cső átmérő [mm/"]	Cikkszám	Szín
	100-125 / 4-5	4-100125	fehér 
Védőrács	Cső átmérő [mm/"]	Cikkszám	Szín
	75	5-17	fehér 

ALSIDENT® SYSTEM 75 TELESZKÓPOS rendszer 3 részből áll, amelyeket külön kell megrendelni: elszívó kar, bura és tartó konzol.

Az elszívó karokhoz a cikkszámok a másik oldalon találhatóak.

A kiegészítőkkal kapcsolatos további információkat talál a [www.alsident.com](http://www.alsident.com) oldalon.

Kereskedő