



ALSIDENT[®] SYSTEM 63

Braccio di aspirazione in materiale chimico-resistente





Aspirazione localizzata – per un ambiente di lavoro pulito

L'installazione di un sistema di aspirazione localizzato all'origine dei fumi, durante le operazioni di lavoro, previene la diffusione di inquinanti nell'ambiente circostante. L'aspirazione localizzata rappresenta la migliore soluzione per garantire un ambiente di lavoro pulito.

Un braccio aspirante di facile impiego per l'utilizzatore

I bracci aspiranti per fumi ALSIDENT® SYSTEM sono autoportanti grazie agli snodi con tiranti interni filettati ed ai supporti a molla. Ciò consente un utilizzo facile per l'operatore per presidiare il punto di origine dell'inquinante durante le operazioni di lavoro.

Facile manutenzione e lunga durata

La sola manutenzione che richiede un braccio aspirante ALSIDENT® SYSTEM è una periodica pulizia. Il braccio è facile da smontare e da rimontare, dopo pulizia, senza l'uso di utensili. I bracci ALSIDENT® SYSTEM sono costruiti con materiali di alta qualità che garantiscono facile manutenzione e lunga durata. Tutte le parti in plastica sono in polipropilene (PP) antiurto. Le parti in alluminio sono anodizzate. Le staffe di montaggio in acciaio sono verniciate a polvere. I tiranti filettati, i supporti a molla e le viti sono in acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Le guarnizioni o-ring non richiedono manutenzione.

Misura delle perdite di carico ed efficienza

L'Istituto Danese di Tecnologia ha effettuato test sul livello sonoro, sulle perdite di carico e sull'efficienza dei bracci aspiranti ALSIDENT® SYSTEM. Contattare ALSIDENT® SYSTEM A/S, il distributore locale o visitare il sito per i risultati dei test di efficienza, le tabelle di dimensionamento e l'altezza di installazione per il corretto posizionamento della cappa.

ALSIDENT® SYSTEM – per postazioni

Applicazioni

ALSIDENT® SYSTEM 63 è idoneo per portate comprese tra 60-120 m³/h


ALSIDENT® SYSTEM 63 è utilizzato in vari settori dove è richiesta la chimico-resistenza come: laboratori e industrie chimico-farmaceutiche, scuole ed università.

Adattabile alle condizioni di lavoro

I bracci ALSIDENT® SYSTEM 63 si installano rapidamente su banchi, a parete o a soffitto con staffe di serie.

I bracci standard ALSIDENT® SYSTEM 63 sono forniti in varie lunghezze fino a raggiungere i 1500 mm di estensione. E' perciò possibile scegliere un braccio idoneo a numerose situazioni.

Per ulteriori informazioni vedere la pagina dettagli-accessori System 63.

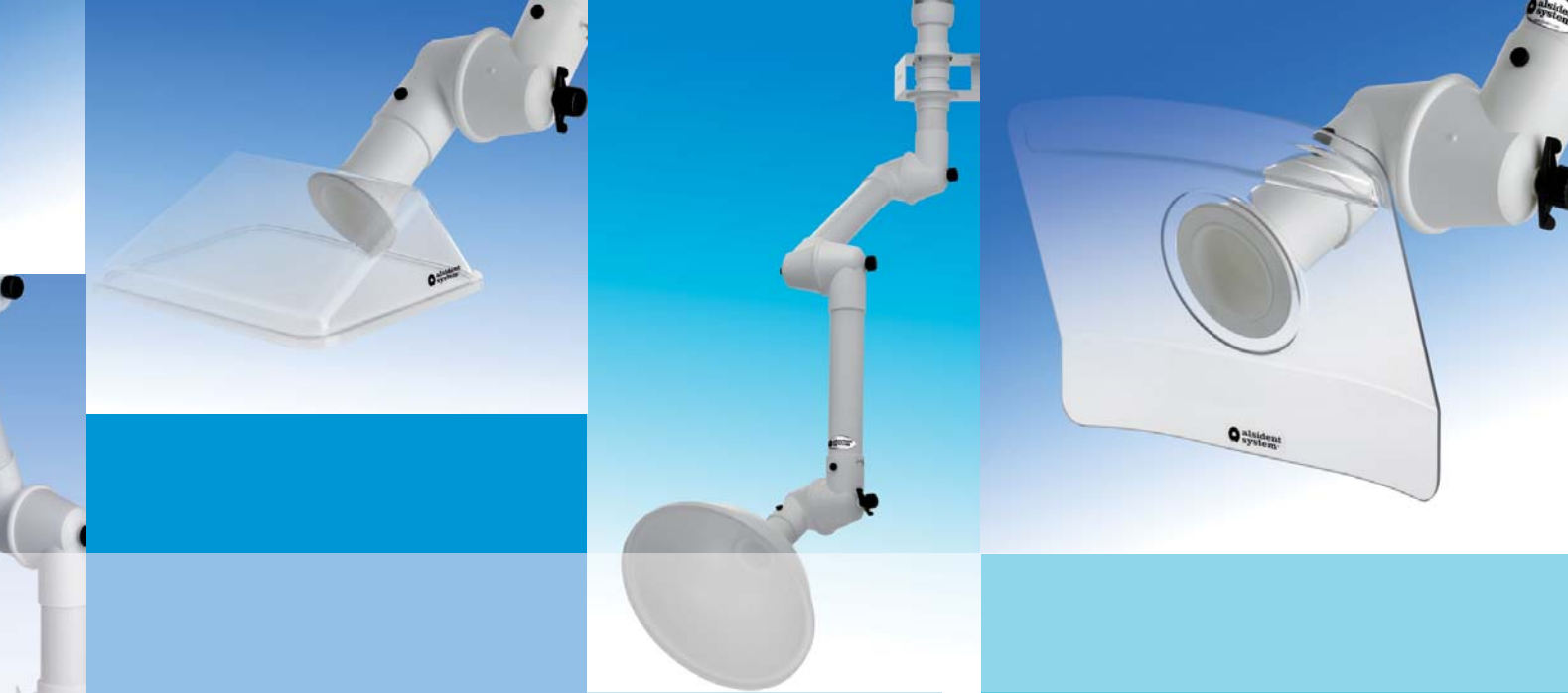

M 63

oni di lavoro in ambiente aggressivo

Materiali

ALSIDENT® SYSTEM 63 viene normalmente impiegato in ambienti dove vi è una particolare necessità di chimico-resistenza. I tubi e gli snodi sono in polipropilene bianco (PP). Per informazioni sull'idoneità del polipropilene alle varie sostanze chimiche, consultare il distributore locale.

Facile manovrabilità

I bracci aspiranti ALSIDENT® SYSTEM 63 sono facilmente spostabili posizionandoli durante le operazioni di lavoro con una sola mano e sono idonei per varie applicazioni dove sono necessari frequenti aggiustamenti del braccio.

Soluzioni su misura

– brevi termini di consegna

Oltre alla serie standard, ALSIDENT® SYSTEM 63 può essere fornito in versioni speciali. Contattare il distributore locale per individuare la migliore soluzione. ALSIDENT® SYSTEM 63 assicura termini di consegna brevi sia per le versioni standard, sia per le versioni su misura.

Materiali

	System 63 PP
Tubi – ø 63 mm	Polipropilene (PP)
Snodi e flange	Polipropilene (PP)
Tiranti filettati e molle	Acciaio inox antiacido ¹⁾
Guarnizioni o-ring	Polietilene (PE)

1) AISI 316L



Accessori per ALSIDENT® SYSTEM 63

... una vasta scelta di cappe e staffe

La serie degli accessori per ALSIDENT® SYSTEM 63 contempla staffe di montaggio, riduzioni, cappe e terminali a becco di flauto.

Sono fornibili riduzioni in Polipropilene (PP) per la connessione dei bracci all'impianto di aspirazione.

Le staffe di montaggio sono realizzate in acciaio verniciato a polvere in colore bianco. Le staffe sono di due tipi: per il fissaggio del braccio sul bordo del tavolo o a parete, per il fissaggio a soffitto sono fornite colonne e prolunghe da 250 mm a 1000 mm di lunghezza.

Viene offerta una larga scelta di cappe di aspirazione per ALSIDENT® SYSTEM 63. Le cappe sono in PETG o in PP trasparente, il terminale a becco di flauto è in polipropilene bianco. Essi sono intercambiabili e offrono la migliore soluzione per ogni postazione di lavoro e per ogni tipo di sostanza inquinante.





Per ulteriori informazioni vedere la pagina dettagli-accessori System 63.

Visitare il sito www.alsident.com o contattare il distributore locale.

Distributore



Bracci Aspiranti System 63

	Estensione [mm]	Codice n°	PP (bianco)
			○
MONTAGGIO A BANCO – 2 SNODI			
	530	63-35-1-	7-5
	630	63-45-1-	7-5
	730	63-55-1-	7-5
MONTAGGIO A BANCO – 3 SNODI			
	800	63-3535-1-	7-5
	1080	63-5545-1-	7-5
	1275	63-6555-1-	7-5
MONTAGGIO A PARETE – 3 SNODI			
	760	63-3535-2-	7-5
	1120	63-3590-2-	7-5
	1025	63-5545-2-	7-5
	1190	63-6555-2-	7-5
	1500	63-9065-2-	7-5
MONTAGGIO A SOFFITTO – 3 SNODI			
	760	63-3535-3-	7-5
	1120	63-3590-3-	7-5
	1025	63-5545-3-	7-5
	1190	63-6555-3-	7-5
	1500	63-9065-3-	7-5

Alsident® System 63 è composto da tre parti da ordinare separatamente: braccio, cappa e staffa.








Per i codici d'ordine di cappe e staffe vedere dettagli – accessori.

Per ulteriori informazioni sugli accessori visitare il sito www.alsident.com.


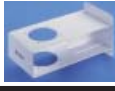


Distributore





Cappe

TERMINALI A BECCO DI FLAUTO	Dim. [mm]	Codice n°	PP (Bianco) Colore/parti in plastica:
			○
	250	1-6325-7-	-5
CAPPE	Dim. [mm]	Codice n°	PP (Bianco) Colore/parti in plastica:
			○
	295 x 250	1-632422-	-5
	ø 280	1-6328-	-5
	ø 385	1-6335-	-5
	ø 385	1-6335-7-	-5
	330 x 240	1-633324-	-5
	330 x 240	1-633324-7-	-5

Staffe

STAFFE	Descrizione	Codice n°	Colore	
	Staffa da banco	2-6310	bianco ○	
	Staffa a parete	2-6325	bianco ○	
COLONNA A SOFFITTO	Lungh. [mm] / bianco	Codice n°	Connessione Di lato Sopra	
	250	2-250-	80	20
	500	2-500-	80	20
	750	2-750-	80	20
	1000	2-1000-	80	20
PROLUNGA COLONNA	Lungh. [mm] / bianco	Codice n°	Connessione Di lato Sopra	
	500	2-500-21-	80	20
	750	2-750-21-	80	20
	1000	2-1000-21-	80	20

Altri Accessori

RIDUZIONI	Diametro tubo [mm]	Codice n°	Colore
	80-63	4-8063-5	bianco ○
	100-63	4-10063-5	bianco ○

ALSIDENT® SYSTEM 63 è composto da tre parti da ordinare separatamente: braccio, cappa e staffa.

Per i codici d'ordine dei bracci vedere dettagli.

Per ulteriori informazioni sugli accessori visitare il sito www.alsident.com.